

Pressoterapia Power-Q1000 Plus



Indicata e suggerita per:

- Edemi linfatici
- Paralisi degli arti (ictus cerebrale)
- Convulsioni
- Circolazione degli arti nella gravidanza
- Malattie croniche dovute a problemi di circolazione venosa
- Malattie del sistema circolatorio
- Artrite reumatoide
- Dissoluzione dei grassi
- Pesantezza delle gambe
- Favorisce il riposo notturno e senso di affaticamento
- Prevenzione e terapia del varicocele
- Trombosi venosa acuta

Power Q-1000 PLUS è il nuovo sistema di pressoterapia per utilizzo domestico e professionale che favorisce la circolazione negli arti e aiuta il metabolismo. Grazie alla continua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio delle camera d'aria interne, la temperatura dei tessuti aumenta e favorisce il deflusso sanguigno.

Power Q-1000 PLUS facilita la circolazione sanguigna negli arti e aumenta la pressione dei tessuti muscolari grazie alla continua azione alternata pressione/rilascio, regolata su 4 step, indispensabile per la cura di edemi e malattie agli arti inferiori e superiori.


Power Q-1000 PLUS riduce i sintomi di cattiva circolazione, come mani e piedi freddi, dolori articolari, stanchezza e senso di affaticamento, dolori muscolari dovuti sia all'età, sia alla scarsa attività fisica, sia a traumi post-incidente.

Power Q-1000 PLUS è un dispositivo medico di classe IIa (CE1023 in accordo con MDD 93/42/CEE).

Power Q-1000 PLUS viene fornita in 5 differenti versioni, a seconda della dotazione di base:

- Q-1000 PLUS TOT – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale (2), tubi di raccordo a 2 derivazioni (3), due plantari pressori (4), tubi di raccordo a 1 derivazione (6), bracciale (7), fascia addominale (8).
- Q-1000 PLUS LEG2 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale (2), tubi di raccordo a 2 derivazioni (3), due plantari pressori (4).
- Q-1000 PLUS LEG1 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, gambale singolo (2), tubi di raccordo a 1 derivazione (6).
- Q-1000 PLUS ARM1 – apparecchio comprensivo di corpo macchina, bracciale (7), tubi di raccordo a 1 derivazione (6).
- Q-1000 PLUS ABD – apparecchio comprensivo di corpo macchina, fascia addominale (8), tubi di raccordo a 1 derivazione (6).

Sono inoltre disponibili come accessori gli estensori per gambali (5) per gambe di ampia circonferenza. I singoli accessori come disponibili come optionals per completare la dotazione e le potenzialità del proprio Power Q-1000 PLUS.

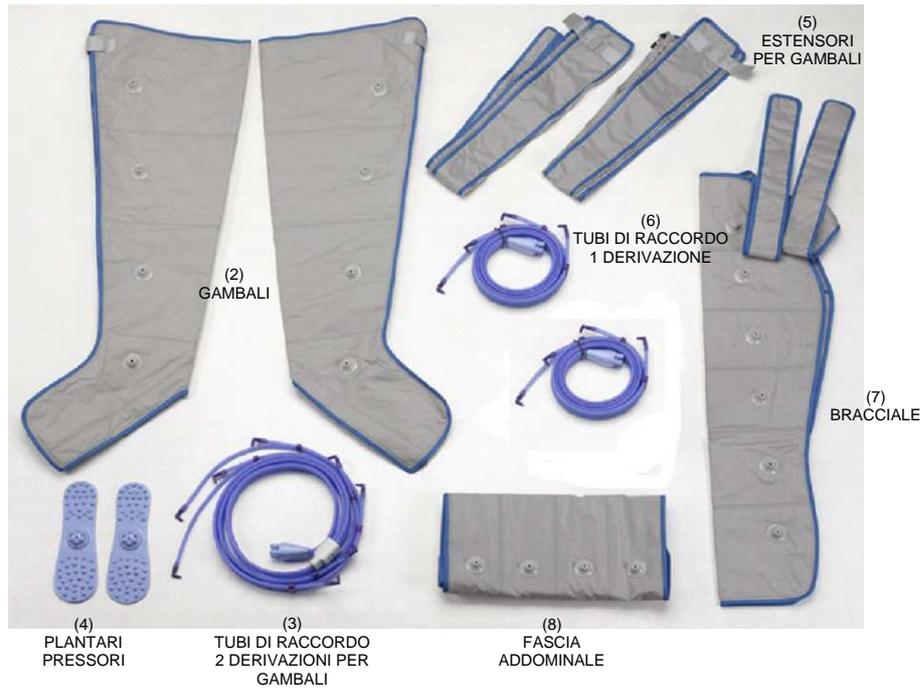

Specifiche tecniche

Alimentazione	110/240 VAC, 50/60 Hz
Corrente	0,2 A
Consumo	25W
Tempo di terapia	0÷30 min.
Pressione	55÷300 mmHg ± 20%
Peso	2 Kg

Principi di funzionamento




Prima del gonfiaggio Durante il gonfiaggio

Questa è la vista in sezione nel momento in cui viene data pressione alla camera d'aria



Pressione Pressione

Comprime le vene e favorisce la circolazione sanguigna ed il linfodrenaggio, grazie alla ripetuta azione di gonfiaggio e sgonfiaggio delle camere d'aria

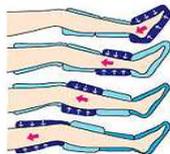

Indossare i gambali e accendere la macchina: inizierà il massaggio dei Vostri piedi, caviglie, polpacci e cosce grazie la gonfiaggio progressivo del gambale stesso



Circolazione con muscolo gonfio Circolazione con muscolo contratto Circolazione con muscolo rilassato

Le gambe sono il secondo cuore del Vostro corpo. I muscoli dei polpacci giocano un ruolo fondamentale per favorire la circolazione del sangue dai piedi al cuore.