


AC0517 – PADDED SUPPORTS
COPPIA SPINTORI TRONCO



Manufacturer	<p>CHINESPORT S.P.A., Via Croazia, 2-33100 Udine, Italia. Phone. +39 0432 621 621 – Fax +39 0432 621 620 – website: www.chinesport.com The company produces according to UNI EN ISO 13485:2012</p>				
Intended use and equipment description	<p>Shaped side supports that offer a larger contact surface with the patient. These are supplementary or alternative to article code AC0003 and can be adjusted in height, width, and depth. (2 pieces).</p>				
Composition	<p>Steel and leatherette.</p>				
Storage	<p>In case of storage the following ambient conditions must be respected:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relative humidity 10% / 90 %; - temperature -10°C / +50°C. 				
Special warning and use restrictions	<p>These devices must not be used:</p> <ul style="list-style-type: none"> • without making all the settings required and recommended setups. • when use is not advisable or causes the patient serious discomfort. • if the original product has been tampered with and/or modified • when set incorrectly or when there is any suspicion that it may harm the patient 				
Collateral effects and contraindications	<p>There is no collateral effects or contraindications during proper use. Use the device always in the proper way. The knowledge of this instruction manual is recommended.</p>				
Unpacking and mounting	<p>Simply remove the device from the package. Never use cutters to open box to prevent damages. Properly dispose of the packaging. The carrier and the supplier must be immediately notified of any damage that may have occurred during transport. Damaged equipment cannot be used.</p>				
Installation and use	<p>Apply the painted element to the guide on the sides of the bed. Insert the perforated rod inside the painted element. Insert the stem of the pad into the hole of the perforated rod. Adjust the height, depth and width of the pusher using clamping keys 1, 2, 3 respectively. Tighten the keys at the end of the adjustment.</p> 				
Maintenance	<p>Check the condition of the safety of the device after each situation of "rough treatment" (ex.: fall, heavy impacts, liquid spills, etc.) and any time you are unsure about the state security apparatus. Routine maintenance tasks are to be carried out at least once every 6 months.</p> <table border="1" data-bbox="395 1823 1453 1944"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1823 624 1854">FREQUENCY</th> <th data-bbox="628 1823 1453 1854">TASK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1861 624 1944">Every six months</td> <td data-bbox="628 1861 1453 1944"> General cleaning Visual and functional inspection of the equipment Frame and mechanical parts: check screws and bolts to ensure they are tight; pin and bushing clearance; check for any damage or deformation </td> </tr> </tbody> </table>	FREQUENCY	TASK	Every six months	General cleaning Visual and functional inspection of the equipment Frame and mechanical parts: check screws and bolts to ensure they are tight; pin and bushing clearance; check for any damage or deformation
FREQUENCY	TASK				
Every six months	General cleaning Visual and functional inspection of the equipment Frame and mechanical parts: check screws and bolts to ensure they are tight; pin and bushing clearance; check for any damage or deformation				


AC0517 – PADDED SUPPORTS
COPPIA SPINTORI TRONCO

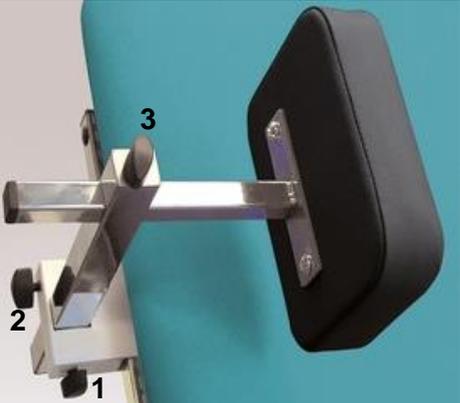

Cleaning	Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water. Dry avoiding direct exposure to the sunlight. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.
Disinfection	For the disinfection of surfaces such as chassis, sky, hand control, etc. we recommend the use of disinfectants such as AMUCHINA® 10% or equivalent disinfectant with sodium hypochlorite 0.1%
Additional informations	Please visit www.chinesport.com

AC0517 – PADDED SUPPORTS
COPPIA SPINTORI TRONCO

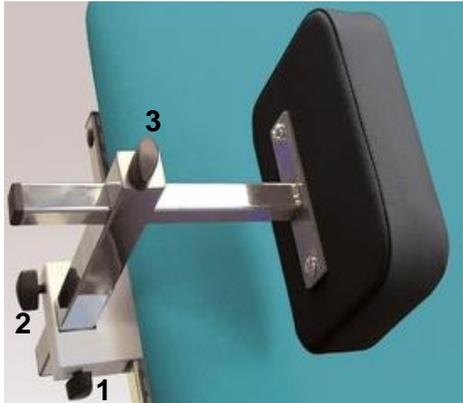

Costruttore	CHINESPORT S.P.A , Via Croazia, 2-33100 Udine, Italia. Tel. +39 0432 621 621 – fax+39 0432 621 620 – sito internet: www.chinesport.it . L'azienda ha un sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 13485:2012					
Destinazione d'uso e descrizione dell'apparecchiatura	Supporti laterali sagomati che offrono una maggiore superficie di contatto con il paziente. Essi sono complementari o alternativi all'articolo codice AC0003 e sono regolabili in altezza, in larghezza ed in profondità. (due pezzi)					
Composizione	Acciaio e similpelle.					
Immagazzinaggio	In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: 1. umidità relativa 10% / 90 %; 2. temperatura -10°C / +50°C.					
Limitazioni d'uso e avvertenze particolari	I sussidi non devono essere utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate. • Quando l'uso è controindicato o genera gravi disagi al paziente. • Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. • In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente. 					
Effetti collaterali	Non si riscontrano effetti collaterali. Utilizzare sempre l'apparecchiatura in maniera consona. È raccomandata la conoscenza del presente libretto di istruzioni.					
Disimballaggio	Estrarre i sussidi dall'imballo senza utilizzare taglierino per evitare di danneggiarli e smaltire correttamente gli imballi. Eventuali danni dovuti al trasporto devono essere prontamente segnalati al trasportatore e al fornitore: i sussidi danneggiati non devono essere utilizzati.					
Installazione ed utilizzo	<p>Applicare l'elemento verniciato porta accessori all'apposita guida ai lati del lettino. Inserire l'asta forata all'interno del dell'elemento verniciato. Inserire lo stelo dello spintore nel foro dell'asta forata. Regolare altezza, profondità e larghezza degli spintori utilizzando le chiavette di serraggio 1, 2, 3 rispettivamente. Serrare le chiavette alla fine della regolazione.</p> 					
Manutenzione	<p>Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni. Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: caduta, urti violenti, versamento di liquidi, etc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio. Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno eseguiti almeno una volta ogni dodici mesi. Mantenere costantemente pulito.</p> <table border="1" data-bbox="400 1944 1461 1968"> <thead> <tr> <th>FREQUENZA</th> <th>OPERAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		FREQUENZA	OPERAZIONE		
FREQUENZA	OPERAZIONE					

AC0517 – PADDED SUPPORTS
COPPIA SPINTORI TRONCO



	Annuale	Pulizia generale Ispezione visiva e funzionale Verifica serraggio viti, stato di usura componenti ed assenza di lesioni e deformazioni
Lavaggio		Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua. Asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente.
Disinfezione		Per la disinfezione delle superfici si consiglia l'utilizzo di prodotti disinfettanti quali AMUCHINA® 10% o equivalente con sodio ipoclorito allo 0,1.e neutro. Risciacquare bene.
Ulteriori informazioni		Visitare il sito www.chinesport.it