

VALVOLA BIOSAFE

IT

INDICAZIONI:

La valvola Biosafe è un dispositivo per il prelievo ed infusione di liquidi senza ago. La valvola è compatibile con i seguenti dispositivi medicali corredati di connessioni luer maschio: Defussori, Prolunghe, Siringhe/Siringhe preimpilate, Cateteri venosi centrali, Rampe di rubinetti, Rubinetti.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Aprire la confezione dal punto di apertura e rimuovere la capsula di protezione (Fig.1).
2. Raccordare il luer femmina del catetere o della prolunga al luer lock maschio del Biosafe (Fig. 2).
3. Pulire il sigillo in silicone posto sul LL/Femmina del Biosafe per maggior sicurezza. Durante questa operazione fare attenzione a non contaminare il dispositivo.
4. Raccordare la connessione terminale maschio del dispositivo di infusione o della siringa, al Biosafe prima premendo e poi ruotando il dispositivo fino al fissaggio. Mantenere i due dispositivi coassiali durante questa operazione. Non usare aghi.
5. Per sconnettere, ruotare il dispositivo di infusione o la siringa in senso inverso, finché non sarà separato. Non rimuovere il Biosafe dal catetere del paziente o dal dispositivo di infusione (Fig. 3).
6. Disinfettare con soluzione a base non alcolica il Biosafe dopo ogni utilizzo per una migliore tecnica asettica.

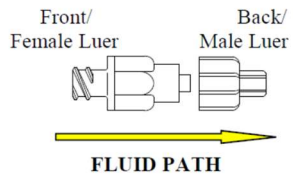
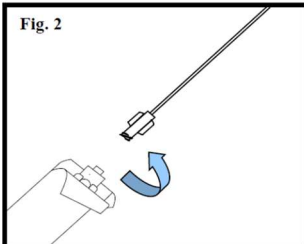
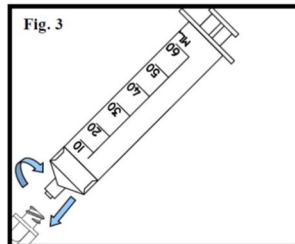
Il Biosafe è un sistema chiuso e non necessita di capsule di protezione.

Prodotto sterile ed apirogeno.

AVVERTENZE:

- Usare una Tecnica Asettica.
- Non utilizzare con aghi.
- Da utilizzare solo se la confezione è integra.
- La sterilità è garantita soltanto a confezione integra.
- Il presente dispositivo va utilizzato una sola volta per un singolo paziente e va gettato subito dopo. Il riutilizzo non è previsto perché il dispositivo perde la sterilità. Il rischio associato al suo riutilizzo è la contaminazione del dispositivo stesso, che può portare all'infezione del paziente, possibile causa di malattia o morte del medesimo.

ARIES sottolinea l'importanza di un uso corretto del dispositivo secondo le istruzioni d'uso indicate e solo da parte di personale medico autorizzato, onde evitare danni al paziente o all'utilizzatore operatore stesso.

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**

ARIES S.r.l.
Biomedical Devices

Via XXV Luglio, 43
41037 Mirandola (MO) ITALY
Tel. 0535/610773 - Fax 0535/610774

CE
0123