



MANUALE D'USO COMODA 4 IN 1 IN ACCIAIO ROCCIA



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Demarta Virginio. I prodotti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le Vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'articolo da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

AVVERTENZE GENERALI

1. Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate da questo manuale. Se persistono dubbi contattare la DEMARTA VIRGINIO SAS.
2. Valutare sempre la compatibilità del prodotto con le caratteristiche del soggetto insieme al medico curante o al terapeuta.
3. Verificare sempre l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo, anche da nuovo. Non utilizzare se danneggiato o usurato.
4. La DEMARTA VIRGINIO SAS declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti un utilizzo improprio, non concordato con una figura professionale, non corrispondente a quanto indicato sul manuale d'uso.
5. Eventuali incidenti, anomalie, rotture, vanno segnalate alla DEMARTA VIRGINIO SAS al fine di monitorare la qualità e le criticità del prodotto.
6. Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
7. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
8. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La DEMARTA VIRGINIO SAS dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa DEMARTA VIRGINIO SAS è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici.

A tal scopo la DEMARTA VIRGINIO SAS garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

- I dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
- I dispositivi NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
- I dispositivi NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
- I dispositivi vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
- I dispositivi sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.

DESTINAZIONE D'USO

La comoda 4 in 1 risulta un utile ausilio per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle svariate funzioni può essere utilizzata in strutture sanitarie e a domicilio.







AVVERTENZE SPECIFICHE

- Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa (120 Kg).
- Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose.
- Assistere sempre il malato durante le operazioni di movimentazione.
- Prima di trasferire il paziente dalla/sulla comoda, assicurarsi che quest'ultima sia posta su una superficie piana e stabile.
- Evitare di lasciare il dispositivo all'esterno.
- Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto nonché lo stato dei puntali di appoggio. Sostituirli una volta usurati.

DESCRIZIONE

La COMODA 4 IN 1 ROCCIA ha un telaio pieghevole in acciaio regolabile in altezza di facile assemblaggio. Può essere usata come:


- rialzo wc,
- supporto wc,
- sedia comoda,
- sedile per doccia.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza Seduta	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm						
01.04.32	51	54	45/55	120	5.7	62x35x51

ASSEMBLAGGIO



Montare il telaio (1): Posizionare le gambe del telaio.

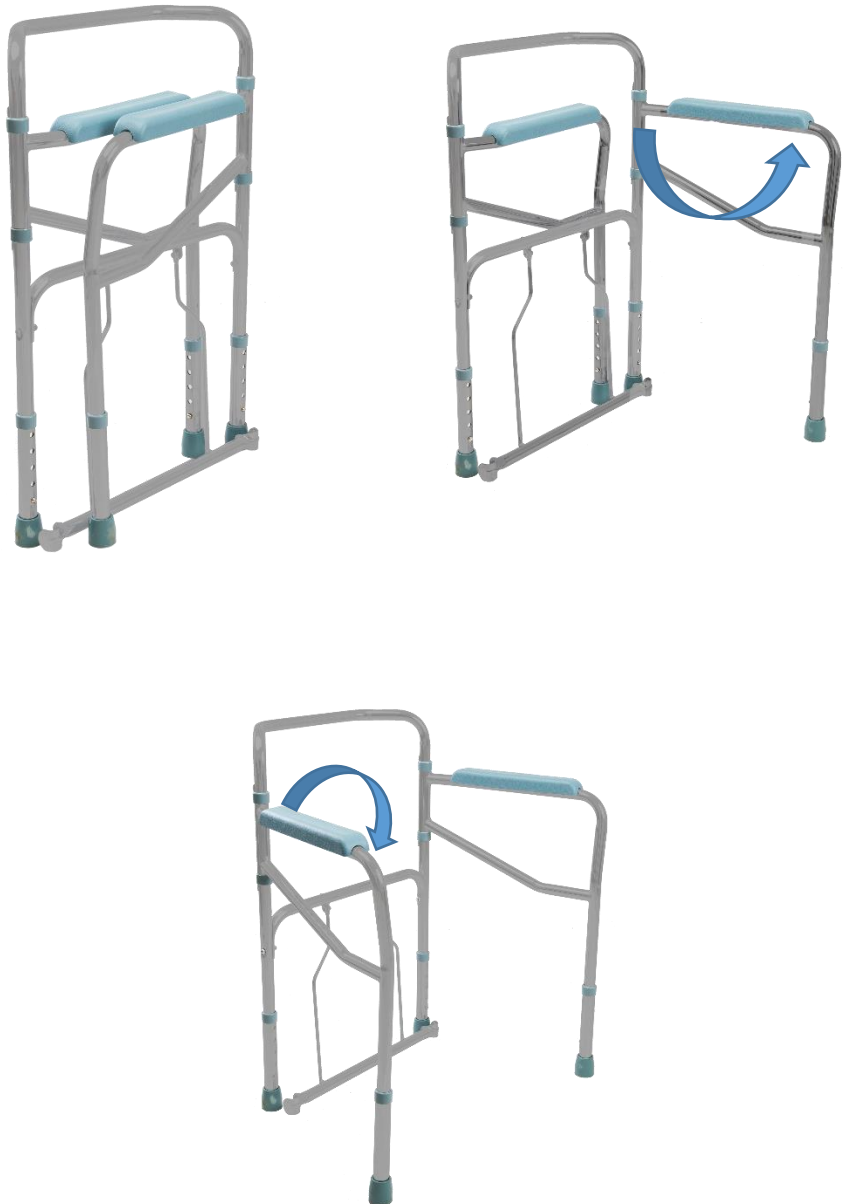

Agganclare la staffa centrale.



Posizionare il secchiello (2) e tappo (3) sul telaio appena montato.





PRIMA DI OGNI USO


- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo.

MODALITÀ D'USO

1. Sedersi distribuendo il peso su tutto il sedile. Non sedersi spingendo solo su un lato.
2. Appoggiarsi sempre su entrambi i braccioli per alzarsi e mantenere l'equilibrio.
3. In caso di utilizzo della sedia da parte di persone con particolari difficoltà motorie, il personale sanitario o il caregiver dovrà sempre supervisionare-aiutare l'utilizzatore.

PULIZIA E DISINFEZIONE

Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili
Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo:

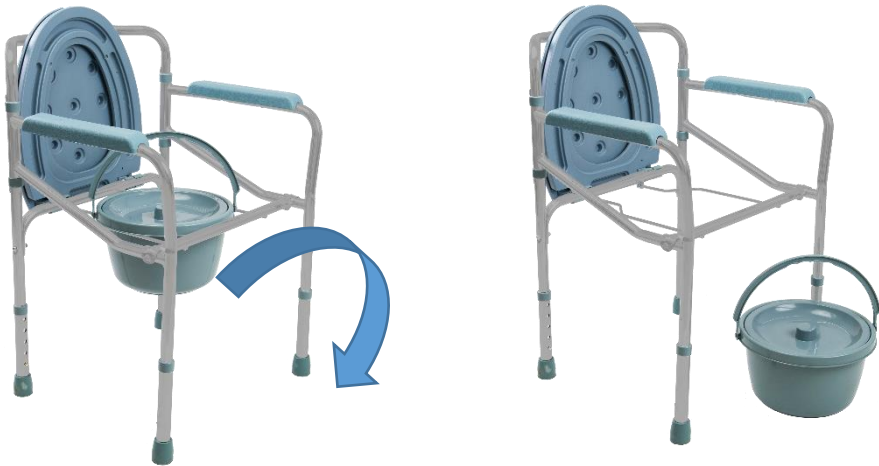

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.



GARANZIA

Tutti i prodotti Demarta sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. Demarta non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.



USER MANUAL 4 IN 1 COMMUNE CHAIR-STEEL ROCCIA



INTRODUCTION

Thank you for choosing Demarta Virginio. The products have been designed and built to meet all your needs for a practical, correct and safe use. This manual contains some small suggestions for a correct use of the device of your choice and some precious advice for your safety. We recommend that you carefully read the entirety of this manual before using the item you purchased. If in doubt, please contact your dealer, who will be able to help and advise you correctly.

The manufacturer reserves the right to make changes to the device and to this manual without prior notice in order to improve its characteristics.

GENERAL WARNINGS

- Use the product in the manner indicated in this manual. If doubts persist, contact DEMARTA VIRGINIO SAS.
- Always evaluate the compatibility of the product with the characteristics of the subject together with the doctor or therapist.
- Always check the integrity of the product before each use, even when new. Do not use if damaged or worn.
- DEMARTA VIRGINIO SAS declines any responsibility for damage to property or persons resulting from improper use, not agreed with a professional figure, not corresponding to what is indicated in the user manual.
- Any accidents, anomalies, breakages must be reported to DEMARTA VIRGINIO SAS in order to monitor the quality and criticalities of the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

DEMARTA VIRGINIO SAS declares under its sole responsibility that the product made and traded by DEMARTA VIRGINIO SAS comply with the applicable provisions of the 2017/745 Regulation on Medical Devices of 5 April 2017.

For this purpose, DEMARTA VIRGINIO SAS guarantees and declares under its sole responsibility what follows:

- The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned regulation.
- The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
- The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
- The devices are packed in NON-STERILE BOX.
- The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above mentioned regulation.

INTENDED USE

The 4 in 1 commode chair is a useful aid for carrying out the daily hygienic functions of disabled and elderly people. Thanks to the various functions it can be used in healthcare facilities and at home.

WARNINGS

- Do not exceed the maximum capacity (120 Kg).
- Use with caution on wet and slippery surfaces.
- Always assist the patient during handling operations.
- Before transferring the patient from / to the comfort, make sure that the device is placed on a flat and stable surface.
- Avoid leaving the device outside.
- Periodically check the stability and strength of the product as well as the condition of the support tips. Replace them when worn.







DESCRIPTION

The **4 IN 1 COMMODE CHAIR ROCCIA** has a steel frame. It is foldable and height adjustable and easy to assemble.


It can be used as:

- toilet lift,
- toilet support,
- commode chair,
- shower seat.

TECHNICAL FEATURES

Code	Length	Width	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm						
01.04.32	51	54	45/55	120	5.7	62x35x51

ASSEMBLY

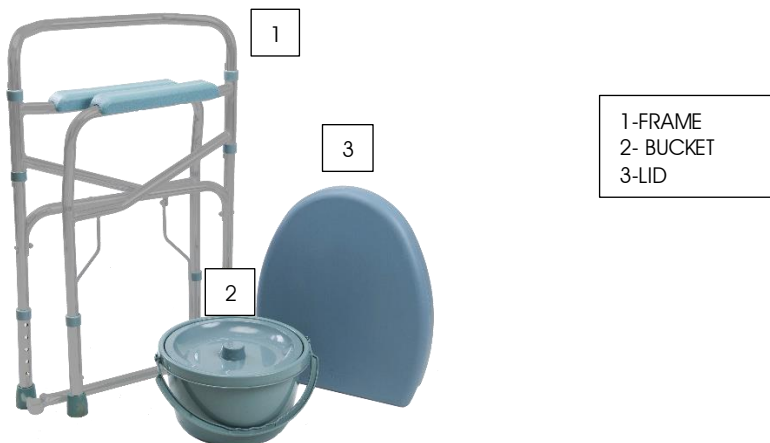

Assemble the frame (1): Position the legs of the frame.



Hook the central bracket.



Place the bucket (2) and lid (3) on the frame just assembled.





USE

- Sit by spreading the weight over the entire seat. Do not sit pushing on one side only.
- Always lean on both armrests to stand up and maintain balance.
- In case of use of the chair by people with particular mobility difficulties, the healthcare staff or caregiver will always have to help the user.

CLEANING

We recommend cleaning once a week with a simple detergent diluted in water
Do not use corrosive products, acids, gasoline or similar
If necessary, disinfect the product using a gentle disinfectant detergent
The toilet bowl must be cleaned after each use



GENERAL DISPOSAL CONDITIONS

When disposing of the device, never use housing solid waste collection systems. It is necessary to dispose of the device through the common ecological islands common for the recycling of used materials.



WARRANTY

DEMARTA products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date.

DEMARTA does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance and failure to adhere to the guidelines and instructions for use.