



MANUALE D'USO FISSAGGIO TORACICO A "X" SENZA ZIP FRONTALE



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Demarta Virginio. I prodotti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le Vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'articolo da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

AVVERTENZE GENERALI

1. Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate da questo manuale. Se persistono dubbi contattare la DEMARTA VIRGINIO S.r.l.
2. Valutare sempre la compatibilità del prodotto con le caratteristiche del soggetto insieme al medico curante o al terapeuta.
3. Verificare sempre l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo, anche da nuovo. Non utilizzare se danneggiato o usurato.
4. La DEMARTA VIRGINIO S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti un utilizzo improprio, non concordato con una figura professionale, non corrispondente a quanto indicato sul manuale d'uso.
5. Eventuali incidenti, anomalie, rotture, vanno segnalate alla DEMARTA VIRGINIO S.r.l. al fine di monitorare la qualità e le criticità del prodotto.
6. Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
7. Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
8. Il prodotto è stato progettato solo per l'uso previsto. Non abusarne in alcun modo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La DEMARTA VIRGINIO S.r.l. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa DEMARTA VIRGINIO S.r.l. è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva UE 2017/745 sui dispositivi medici.

A tal scopo la DEMARTA VIRGINIO S.r.l. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

- I dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
- I dispositivi NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
- I dispositivi NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
- I dispositivi vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
- I dispositivi sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.

DESTINAZIONE D'USO

Il Fissaggio Toracico a "X" senza Zip Frontale ADIGGY in Neoprene Imbottito e Elastico con chiusura in clips in plastica facilita il corretto posizionamento della colonna vertebrale del paziente e fornisce supporto dinamico in caso di movimenti spastici. E' consigliato utilizzarlo con la cintura pelvico/addominale ADX20 o ADX21.

AVVERTENZE SPECIFICHE

- I sistemi di contenzione devono essere usati da personale sanitario qualificato.
Se usati a domicilio è necessario chiedere consiglio al proprio medico o terapeuta.
- Pazienti con contenzioni richiedono un frequente monitoraggio.

DESCRIZIONE

- Tessuto in neoprene imbottito, elastico e resistente.
- Design ergonomico adattato a qualsiasi tipo di morfologia.
- Montaggio rapido con apertura frontale con clips.
- Fissaggio diretto al telaio della carrozzina.




MONTAGGIO



WATCH ME!

SISTEMA DI CHIUSURA CON CLIPS IN PLASTICA

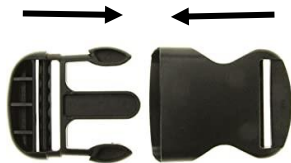

Per aprire il sistema di chiusura con clips in plastica premere verso l'interno su ciascun lato per rilasciare la chiusura. Per agganciare, inserire le due parti insieme e applicando una leggera pressione.

DATI TECNICI

Codice	Taglia	Misure (cm)
01.12.ADX24-S	S	23-33
01.12.ADX24-M	M	33-43
01.12.ADX24-L	L	43-53
01.12.ADX24-XL	XL	53-63

Materiali	
Cintura	Neoprene
Chiusura Clips	Metallo e Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

GARANZIA

Tutti i prodotti Demarta sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. Demarta non garantisce i prodotti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto



USER MANUAL X" TRUNK SUPPORT WITHOUT FRONT ZIP



INTRODUCTION

Thank you for choosing Demarta Virginio. The products have been designed and manufactured to meet all your needs for practical, correct and safe use. This manual contains small tips for the correct use of the device of your choice and valuable advice for your safety. We recommend that you read this manual carefully before using the item you have purchased. If you have any doubts, please contact your dealer, who will be able to help and advise you correctly.

The manufacturer reserves the right to make changes to the device and the following manual without prior notice in order to improve its features.

GENERAL WARNINGS

- Use the product in the manner indicated in this manual. If doubts persist, contact DEMARTA VIRGINIO S.r.l.
- Always evaluate the compatibility of the product with the characteristics of the subject together with the treating physician or therapist.
- Always check the integrity of the product before each use, even when new. Do not use if damaged or worn.
- DEMARTA VIRGINIO S.r.l. declines any responsibility for damage to property or people resulting from improper use, not agreed with a professional figure, which does not correspond to what is indicated in the user manual.
- Any accidents, anomalies, breakages, must be reported to DEMARTA VIRGINIO S.r.l. in order to monitor the quality and criticalities of the product.
- Keep the packaged product away from any heat source as the packaging is made of cardboard.
- Always pay attention to the presence of children.
- The product has been designed for its intended use only. Do not abuse it in any way.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

DEMARTA VIRGINIO S.r.l. declares under its sole responsibility that the product manufactured and placed on the market by DEMARTA VIRGINIO S.r.l. complies with the applicable provisions of EU Directive 2017/745 on medical devices.

To this end, DEMARTA VIRGINIO S.r.l. guarantees and declares under its sole responsibility the following:

- The devices meet the general safety and performance requirements as required by Annex I to Regulation 2017/745 as prescribed by Annex IV to that Regulation.
- The devices are NOT MEASURING INSTRUMENTS.
- The devices are NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
- The devices are marketed in NON-STERILE packaging.
- The devices are to be considered as belonging to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the aforementioned regulation.

INTENDED USE

The ADIGGY Front Zip-Free "X" Thoracic Fixation in Padded and Elastic Neoprene with plastic clip closure facilitates the correct positioning of the patient's spine and provides dynamic support in case of spastic movements. It is recommended to use it with the ADX20 or ADX21 pelvic/abdominal belt.

WARNINGS

- Retainers should be used by qualified healthcare personnel.
If used at home, you should seek advice from your doctor or therapist.
- Patients with restraints require frequent monitoring.

DESCRIPTION

- Padded, elastic and resistant neoprene fabric.
- Ergonomic design adapted to any type of morphology.
- Quick assembly with front opening with clips.
- Direct attachment to the wheelchair frame.




ASSEMBLY



WATCH ME!

CLOSURE SYSTEM WITH PLASTIC CLIPS

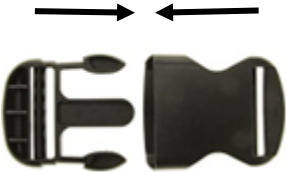

To open the plastic clip closure system, press inwards on each side to release the closure. To attach, insert the two parts together and apply light pressure.

TECHNICAL FEATURES

Code	Size	Dimensions (cm)
01.12.ADX24-S	S	23-33
01.12.ADX24-M	M	33-43
01.12.ADX24-L	L	43-53
01.12.ADX24-XL	XL	53-63

Materials	
Belt	Neoprene
Clips Closure	Metal and Plastic
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer

GENERAL DISPOSAL CONDITIONS



When disposing of the device, never use housing solid waste collection systems. It is necessary to dispose of the device through the common ecological islands common for the recycling of used materials.

WARRANTY

DEMARTA products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the purchasing date.
DEMARTA does not guarantee for damages caused by the following condition: natural disaster, not authorized maintenance and failure to adhere to the guidelines and instructions for use.