











**ROLLATOR 2 RUOTE CLASSICO IN ACCIAIO**  
*Istruzioni per l'uso*  
**DISPOSITIVO MEDICO**

**RIF. 826045**



## SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

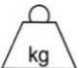	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di produzione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Proteggere dall'umidità
	Peso massimo utenteMax. peso		Dispositivo medico

### IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si riesce a leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o specialista sanitario prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Ti consiglierà e ti darà informazioni sulla tecnica di camminata più adatta al tuo caso.

Distributore: questo avviso deve essere dato agli utenti di questo prodotto.

### DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Rollator classici in acciaio a 2 ruote sono dispositivi di ausilio alla deambulazione destinati a persone con mobilità ridotta. Questi deambulatori sono destinati all'uso interno ed esterno e si ripiegano per riporli o trasportarli facilmente.

### PRECAUZIONI PER L'USO



La mancata osservanza delle precauzioni per l'uso può provocare lesioni gravi.

Non superare il limite di peso massimo di 136 kg.

Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.

Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.

Controllare regolarmente tutte le parti che compongono il prodotto (viti, tubi, estremità, maniglie) e se tutti i collegamenti a vite sono serrati correttamente.

Tenere saldamente il prodotto durante l'utilizzo. In caso di caduta, lasciare andare il prodotto per non caderci sopra.

Muoviti sempre lentamente e a piccoli passi per garantire che la distribuzione del peso sia uniforme e che la tua posizione sia stabile e sicura.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli a cui è destinato questo prodotto: non sollevare o spostare mobili, ad esempio!

Non appendere NULLA alla parte anteriore del prodotto. Ciò potrebbe farti perdere l'equilibrio e farti cadere. In caso di inutilizzo prolungato fate controllare il vostro apparecchio dal vostro rivenditore specializzato.

Non modificare questo articolo. Se necessario, utilizzare solo parti originali per ripararlo. Solo personale qualificato dovrebbe riparare questo articolo.

Una volta aperto o assemblato il prodotto, assicurarsi che sia bloccato in posizione APERTA e che sia stabile sul pavimento prima di utilizzarlo.

Fare attenzione alle buche, alle deformazioni del terreno e alle griglie di protezione degli alberi che possono far perdere l'equilibrio e provocare la caduta.

Fare attenzione a non intrappolare/pizzicare le dita durante la piegatura/apertura del prodotto.

Assicurarsi che le manopole siano serrate allo stesso livello e che le maniglie siano sicure.

Non utilizzare il deambulatore per camminare all'indietro.

Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso.

Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.

Assicurarsi che il sedile sia fissato in posizione piatta prima dell'uso. Non

utilizzare il sedile per trasportare oggetti.

Non sedersi sul sedile quando il deambulatore è in pendenza.

Da seduti non cercare di raggiungere gli oggetti sporgendosi in avanti. Non appoggiarsi all'indietro poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del deambulatore.





Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si viaggia su superfici inclinate, irregolari o scivolose. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un rischio significativo di cadute o lesioni.


Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.

In caso di parti danneggiate, rotte o usurate contattare il rivenditore.

## MONTAGGIO E UTILIZZO

La messa in servizio di questo prodotto deve essere eseguita solo da personale qualificato. Una regolazione impropria può comportare un uso improprio e il rischio di incidenti. È quindi essenziale che il prodotto venga adattato individualmente a ciascun paziente da personale qualificato. Non esitate a chiedere al vostro rivenditore in caso di dubbi.

	Tubo di spinta manuale x2		Vite x2
	Giunto curvo x2		Ruota x2

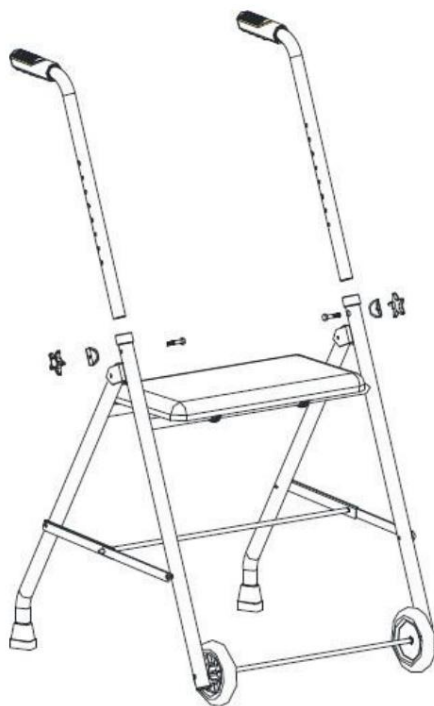

## CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione adeguata del prodotto potrebbe provocare lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il deambulatore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi o detergente.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti attorno all'asse o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro né prodotti a base di solventi, perché ciò potrebbe danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cingolano.
- Controllare regolarmente che tutte le viti siano fissate e serrate correttamente.
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il deambulatore. Consultare un rivenditore autorizzato.

- **Elenco di controllo:**

Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue:

Controlla l'oggetto	In ogni momento- sta mentendo	Ogni settimana	Tutti IL mese	Ogni anno
Clip e rotella per la regolazione dell'altezza	X			
Saldature strutturali alle ruote		X		
Pulizia				X
Viti e elementi di fissaggio		X		
Stabilità del telaio e dello schienale			X	
Condizioni del sedile			X	
Condizioni dei pattini e delle ruote		X		

## CAMBIO DI PROPRIETA'

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato rispettando le istruzioni igieniche. Durante cessione del prodotto, ricordarsi di fornire al nuovo utente tutta la documentazione tecnica necessaria. In anticipo, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

## RACCOLTA DIFFERENZIATA

Quando il prodotto diventa inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri riciclare per conto tuo, chiedilo all'azienda locale di gestione dei rifiuti linee guida per lo smaltimento.

## MAGAZZINAGGIO



Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi rischi di ferite gravi

Non conservare il deambulatore per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro un finestra, vicino a un radiatore o in macchina) o vicino a una fonte fredda.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di conservazione e conservazione dei deambulatori.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo deambulatore tramite l'imballaggio da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salino)
- Conservare tutte le parti rimosse insieme, nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza il minimo carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del deambulatore, non incastrare nulla...).

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni complessive	Lunghezza 61 cm x Larghezza 53 cm x Altezza 76-92 cm
Larghezza tra le maniglie	45 cm
Dimensioni del sedile	Lunghezza 41 cm x Larghezza 21 cm x Altezza 35 cm
Dimensioni piegate	Lunghezza 52 cm x Larghezza 16 cm x Altezza. 69 cm
Peso	4,5 kg
Peso massimo utilizzato	136 chilogrammi

## DURATA DI UTILIZZO

La durata prevista di questo prodotto è di 5 anni in condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione normali. Al di là di questo periodo il prodotto può essere utilizzato per lo stesso periodo purché sia ancora in buone condizioni.

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITÉS fornirà pezzi di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contatta il distributore a