

SEDIA A ROTELLE MOUVLIGHT






Istruzioni per l'uso

DISPOSITIVO MEDICO

**RIF. 876001.40 – RIF. 876001.42 – RIF. 876001.45
RIF. 876001.48 – RIF. 876001.50**



SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di produzione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE (
	Riferimento del prodotto		Proteggere dall'umidità
	Peso massimo utente		Dispositivo medico

MANUALE DI ISTRUZIONI

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si riesce a leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.


Consultare il proprio medico o specialista sanitario prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Sarà lui a consigliarvi e ad informarvi sull'utilizzo più opportuno al vostro caso.

Distributore: questo avviso deve essere dato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Le sedie a rotelle Mouvligh sono dispositivi di assistenza alla deambulazione destinati alle persone con mobilità ridotta. Questi prodotti sono destinati all'uso interno ed esterno e si ripiegano per riporli o trasportarli facilmente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

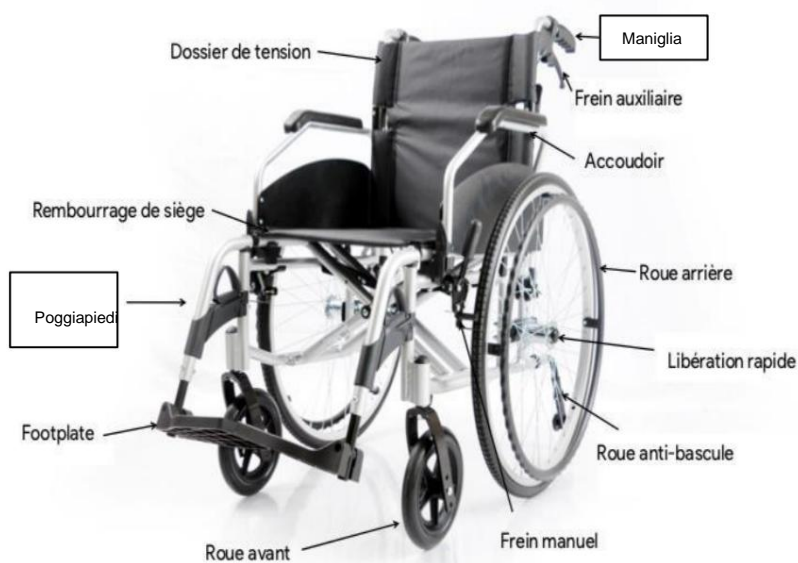

PRECAUZIONI PER L'USO



La mancata osservanza delle precauzioni per l'uso può provocare lesioni gravi.

Non superare il peso massimo supportato di 125 kg.

Assicurarsi che tutte le parti siano sicure e in buone condizioni.

Non utilizzare il prodotto su scale o scale mobili.

Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.

Controllare che i freni funzionino correttamente prima dell'uso.

Questa sedia a rotelle è stata progettata per l'uso all'interno di veicoli di tutti i tipi. Trasferire sempre l'utente della sedia a rotelle su un sedile approvato dal produttore del veicolo e utilizzare tutte le cinture di sicurezza disponibili.

Non utilizzare questa sedia a rotelle su strade, vie o altro traffico superficiale.

Assicurarsi di attivare completamente i freni delle ruote quando si sale o si scende dalla sedia o quando ci si trova in un ascensore o in un montacarichi per sedie a rotelle. La sedia a rotelle deve trovarsi su una superficie piana, stabile e livellata.

Quando si sale o si scende dalla sedia a rotelle, non salire o caricare il peso sul piede. Quando provi ad estendere le braccia sulla schiena, fallo solo quanto è possibile estendere il braccio senza cambiare la posizione seduta.

Non stare in piedi sulla sedia a rotelle. Se è necessario

appoggiarsi o appoggiarsi alla sedia a rotelle, assicurarsi che le ruote anteriori siano rivolte in avanti, estendendo la superficie di base della ruota, per stabilizzare la sedia a rotelle.

Richiedere una consulenza professionale quando si salgono o scendono pendenze superiori a 10 cm. Se è necessario fermarsi in pendenza, evitare movimenti bruschi e rapidi durante lo spostamento. Il movimento può causare instabilità a causa dell'angolazione della sedia. L'uso dei freni potrebbe provocare frenate accidentali, movimenti incontrollati o bloccaggi improvvisi. Cercare di non cambiare direzione su una rampa, ciò potrebbe causare instabilità e provocare il ribaltamento della sedia.

Durante l'uso, bloccare i freni per tutte le azioni.

Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.

Quando il prodotto è in posizione stazionaria, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il prodotto se i freni sono bloccati.

Assicurarsi che i poggiatesta siano fissati saldamente.

Assicurarsi che il perno di smontaggio sia saldamente agganciato alle ruote posteriori e al telaio della sedia.

Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si viaggia su superfici inclinate, irregolari o scivolose.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un rischio significativo di cadute o lesioni.

Non utilizzare il prodotto su un pendio bagnato, ghiacciato o innevato.

Fare attenzione al rischio di pizzicamento durante l'uso.

In caso di parti danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore

ASSEMBLEA

ALTEZZA DEL SEDILE

In questa sedia, l'altezza del sedile viene regolata con il supporto della ruota posteriore dove si trova l'asse. Una volta regolata l'altezza del sedile nella parte posteriore, regolarla correttamente e adeguatamente in modo che il sedile non sia inclinato in avanti o troppo indietro.

Cambia la forcella o cambia la posizione della ruota anteriore scegliendo un altro foro nella forcella.

Lo scopo della regolazione dell'altezza del sedile è massimizzare l'efficienza dell'utente, adattandolo all'ambiente, in base alle sue esigenze fisiche e meccaniche.

REGOLAZIONE DEI POGGIAPIEDI

I poggiatesta si piegano verso l'interno per un facile trasferimento. Il poggiatesta è regolabile in gradi di inclinazione.

Nota: per rimuovere i poggiatesta, premere il grilletto verso la sedia, ruotare i poggiatesta verso l'esterno o verso l'interno e sollevarli. Per installare le pedane, posizionare il perno in plastica sul tubo davanti al sedile, ruotare le pedane verso l'interno, fino ad afferrare il bullone di bloccaggio.

FISSAGGIO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA RUOTA

POSTERIORE Il sistema di fissaggio-regolazione è la regolazione più importante per la sedia a rotelle, poiché determina il baricentro, la rotazione della sedia, i gradi delle ruote e l'altezza del sedile. Il centro di gravità è determinato dalla posizione dell'utente sulla sedia. È possibile modificare la coordinata verticale della maniglia del freno modificando l'altezza del sedile, ma più alto è il sedile, più è instabile.

La posizione dell'asse posteriore rispetto alla coordinata orizzontale del baricentro determina la facilità di propulsione e di manovrabilità della sedia, ma anche la conseguente stabilità.

BRACCIOLI

Per consentire un facile accesso a entrambi i lati della sedia, i braccioli sono ripiegati. Assicurarsi che siano bloccati quando li si sostituisce.


OPZIONI E ACCESSORI

Piccola ruota da transito
Attacco a sgancio rapido
Cuscino del sedile

UTILIZZO


1 - UTILIZZO DELLA SEDIA A ROTELLE

Frenare le ruote ogni volta che si tenta di scendere dalla carrozzina e, se necessario, chiedere aiuto ad un assistente o ai familiari.

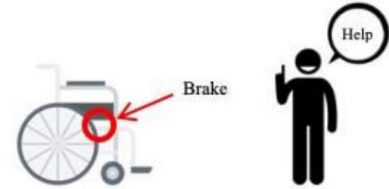

Blocca le ruote ogni volta che sollevi la carrozzina e, se necessario, chiedi aiuto a un assistente o a un tuo familiare

2 - COME USCIRE DA SOLI DALLA SEDIA A ROTELLE

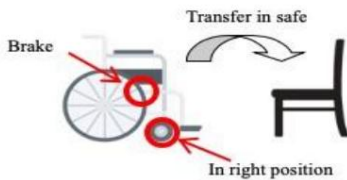

Evitare di sporgersi in avanti o indietro per afferrare o raggiungere oggetti. Esiste il rischio di ribaltamento o perdita di equilibrio, soprattutto se il sedile ha una seduta ridotta e/o un'altezza della seduta elevata (ad esempio cuscino)



Assicurarsi che le ruote anteriori siano in avanti e che le ruote posteriori siano bloccate quando si è seduti sulla sedia a rotelle da trasferire in un altro luogo (sedia, letto, ecc.). Non oscillare!

3 - SUPERARE GLI OSTACOLI

Richiedi un assistente, purché tu debba superare ostacoli maggiori di 5 cm.



Senza aiuto: la sedia può ribaltarsi e danneggiare la persona e la sedia; la sedia potrebbe bloccarsi e le ruote posteriori potrebbero rimanere sospese in aria.



4 - SALITA E DISCESA



ARRAMPICATA Preparati a salire con la sedia. Non appendere nulla sopra lo schienale o sopra i polsi. Disporre la sedia per inclinarla. Per risalire le pendenze è sufficiente installare i dispositivi antiribaltamento. Per fare ciò, inserire i dispositivi antiribaltamento nel tubo posteriore e assicurarsi che la clip di sicurezza esca dal foro del tubo posteriore. Preparati a salire con la tua sedia.



ABBASSAMENTO



Fai attenzione

Chiedi aiuto quando scendi da un pendio. Fare attenzione che le ruote non restino bloccate a terra durante la discesa.

5 – SALIRE E SCENDERE LE SCALE

Per salire le scale, una volta che la sedia viene inclinata all'indietro da una persona che la tiene per le maniglie, le ruote posteriori appoggiano sui gradini. La seconda persona deve tenere una parte fissa della parte anteriore del telaio, sollevare il sedile e tenerlo fermo finché la prima persona non si trova sul gradino successivo e così via.

Non rilasciare la sedia finché non si è fatto l'ultimo gradino e ci si è allontanati dalla scala.




6 – UTILIZZARE L'ASCENSORE

La chiusura automatica della porta può causare lesioni alle mani!

Pratico : Per la sicurezza della propria sedia a rotelle, dentro e fuori casa, è necessario acquisire confidenza con le principali manovre, come spingere, frenare, andare avanti e indietro su superfici piane (possibilità con l'aiuto di un assistente). Evitare innanzitutto pendenze, superfici irregolari e situazioni simili.

Attraversamento di gradini stretti: quando si attraversano spazi stretti, ad esempio attraverso ingressi di edifici, porte, ecc. Presta attenzione ai gomiti. - Rischio di infortunio!

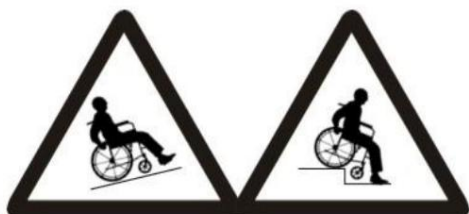

7 – TRASPORTO DELLA SEDIA

Anche se il metodo da seguire per trasportare la sedia non è unificato.

1. Rimuovere i poggiatesta.
2. Rimuovere i braccioli.
3. Rimuovere le ruote nel caso in cui subiscano un rilascio rapido.
4. Tenere la sedia tirando le maniglie ai lati del sedile fino a quando la sedia non sarà completamente piegata.
5. Mettilo in macchina.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione adeguata del prodotto potrebbe provocare lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti detergenti o a base solvente.
 - Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
 - Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti intorno all'asse, ai freni o alle ruote.
 - Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
 - Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano.
 - Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
 - Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
 - Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione di blocco, quindi provando a spingerle Prodotto.
 - Controllare l'imbottitura per eventuali tagli, strappi o uso intenso. Sostituire se necessario.
 - In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il prodotto. Consultare un rivenditore autorizzato.
- Elenco di controllo:

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente come segue:

Controlla l'oggetto	In qualsiasi momento	Ogni settimana	Ogni mese
Viti e elementi di fissaggio		X	
Stabilità del telaio e dello schienale			X
Condizioni del sedile e delle ruote			X
Funzionamento dei freni e delle rotelle antiribaltamento	X		
Funzionamento del bracciolo		X	

CAMBIO DI PROPRIETA'

riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato rispettando le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il deambulatore, ricordati di fornire tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. Il prodotto deve essere prima ispezionato da uno specialista autorizzato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Quando il prodotto diventa inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri riciclare per conto tuo, chiedi all'azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi.

Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino ad un termosifone) o vicino ad una fonte fredda.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di stoccaggio e conservazione del prodotto.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto con l'imballaggio da polvere e corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, salsedine)
- Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso posto (o contrassegnavle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza il minimo carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla, ecc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	876001.40	876001.42	876001.45	876001.48	876001.50
Dimensioni complessive	Larghezza.62 x altezza.90 x profondità. 102 cm	Larghezza.64,5 x altezza.90 x profondità. 102 cm	Larghezza.67 x altezza.90 cm x profondità. 102 cm	Larghezza.69,5 x altezza.90 cm x profondità. 102 cm	Larghezza.72 x altezza.90 cm x profondità. 102 cm
Dimensioni del sedile	Larghezza.40 x altezza.47 x profondità. 42 cm	Larghezza 42,5 x altezza 47 x profondità 42 cm	Larghezza.45 x altezza.47 x profondità. 42 cm	Larghezza.47,5 x altezza.47 x profondità. 42 cm	Larghezza.50 x altezza.47 x profondità. 42 cm
Larghezza piegata	36 cm				
Dimensioni della ruota anteriore	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Dimensioni della ruota posteriore	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Colore grigio metallizzato					
Peso	15 kg	15,4 chilogrammi	15,8 chilogrammi	16,1 chilogrammi	16,5 kg
Peso massimo supportato 125 kg		125 kg	125 kg	125 kg	125 kg

DURATA D'USO

questo prodotto è di 5 anni in condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione normali. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Peso massimo di utilizzo	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

VIDA UTIL

La durata prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Ma per questo periodo il prodotto può essere utilizzato se è in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia di anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. Le IDENTITÀ sono proporzionali ai pezzi sostitutivi per qualsiasi pezzo che risulti roto a causa di un difetto di fabbricazione, di progettazione o di materiale. Contattare il distributore per ottenere il prodotto nel caso sia necessario presentare un reclamo. I problemi derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o danneggiamento non sono soggetti a questa garanzia. Contatta il distributore che hai acquistato
Il prodotto soddisferà la garanzia.



Identità – Polo ZA 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Peso massimo consentito



125 kg