


SPIRIT X3
Manuale di istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO
RIF. 826099


SIMBOLO SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO
SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI
SIMBOLO SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di produzione		Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Non tollera l'umidità
	Peso massimo utente		Dispositivo medico

AVVISO D'ISTRUZIONI

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si riesce a leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o specialista sanitario prima di utilizzare un dispositivo di assistenza. Sarà lui a consigliarvi e ad informarvi sull'utilizzo più opportuno al vostro caso.

Distributore: questo avviso deve essere dato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il Rollator Spirit X3 è un dispositivo di assistenza alla deambulazione destinato a persone con mobilità ridotta. Questo prodotto è destinato all'uso interno ed esterno e si ripiega per riporlo o trasportarlo facilmente.

PRECAUZIONI PER L'USO



La mancata osservanza delle precauzioni per l'uso può provocare lesioni gravi.

- Non superare il limite massimo di peso di 130 Kg. • Non superare il limite massimo di carico nel cestello (5kg). I carichi devono essere trasportati solo in cestino. Non appendere oggetti pesanti al deambulatore poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
- Assicurarsi che tutte le parti (ruote, cavi e maniglie) siano sicure e in buone condizioni. • Assicurarsi che le manopole siano serrate e alla stessa altezza. • Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili. • Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore. • Il deambulatore è un ausilio per la deambulazione. **Non è una sedia a rotelle.** Non è stato progettato per trasportare una persona seduta sopra. **Tale utilizzo rischia di danneggiare le ruote e la struttura del deambulatore stesso.** Questo potrebbe indebolirsi e non soddisfare più le sue caratteristiche meccaniche durante gli utilizzi futuri. Utilizzare il deambulatore solo come supporto per la deambulazione. • Non utilizzare il deambulatore per camminare all'indietro. • Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso. • Controllare che i freni funzionino correttamente prima dell'uso.

- Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo. • Quando il deambulatore è in **posizione stazionaria**, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il deambulatore se i freni sono bloccati.
- Assicuratevi di mettere le mani su ciascuna maniglia in modo che il deambulatore possa trovarsi in una posizione di forza parallela. • Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si viaggia su superfici inclinate, irregolari o scivolose. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare un rischio significativo di cadute o lesioni. • Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati. • In caso di parti danneggiate, rotte o usurate rivolgersi al rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

Il deambulatore dalla sua scatola e verificare che tutti i componenti siano presenti. Rimuovere tutto l'imballaggio e la protezione.

Assicurarsi che tutti i componenti siano in buone condizioni prima del montaggio.







- 1) Maniglia
- 2) Carrello della spesa
- 3) Cornice
- 4) Ruote
- 5) Maniglia del freno
- 6) Seduto
- 7) Telaio a croce
- 8) Freni

REGOLAZIONE ALTEZZA MANIGLIA:

ha. Mettere il deambulatore in modalità parcheggio (vedere figura 1). B. Tenere premuto il pulsante di regolazione nella parte superiore del telaio (vedere Figura 2). contro Tenere premuto il pulsante e regolare l'altezza della maniglia alzandola o abbassandola (vedere Figura 3). D. Rilasciare il pulsante per bloccare la regolazione dell'altezza. Tirare la maniglia verso l'alto e spingerla verso il basso per verificare che sia bloccata saldamente (vedere figura 4). e. Regolare l'altra maniglia allo stesso modo. F. Verificare che entrambe le maniglie siano impostate sullo stesso contrassegno di altezza.

Nota : non rimuovere il tubo interno dal tubo esterno durante la regolazione dell'altezza delle maniglie.

Per garantire che il deambulatore sia all'altezza corretta, posizionarsi dietro il deambulatore con le braccia lungo i fianchi. Quindi regolare l'altezza delle maniglie all'altezza dei polsi dell'utente.

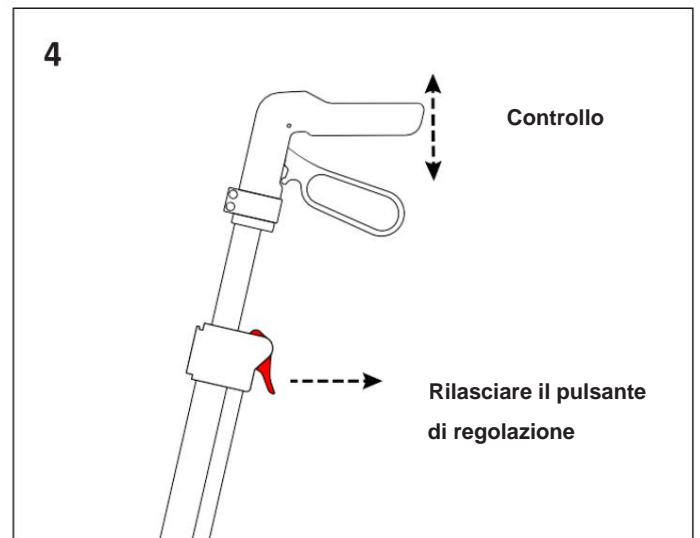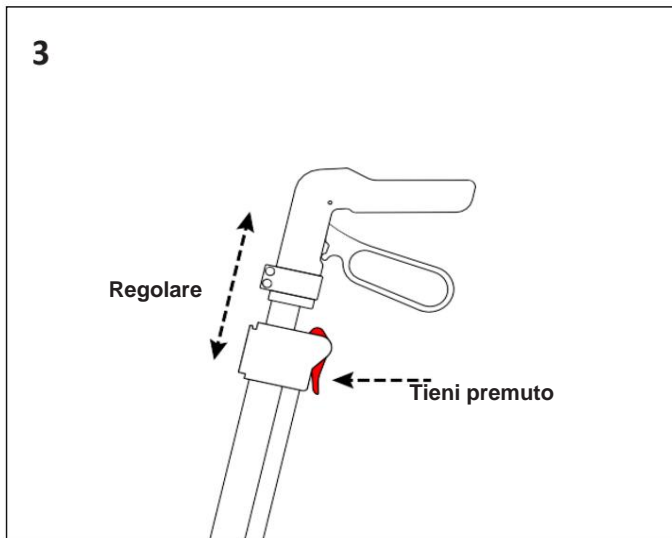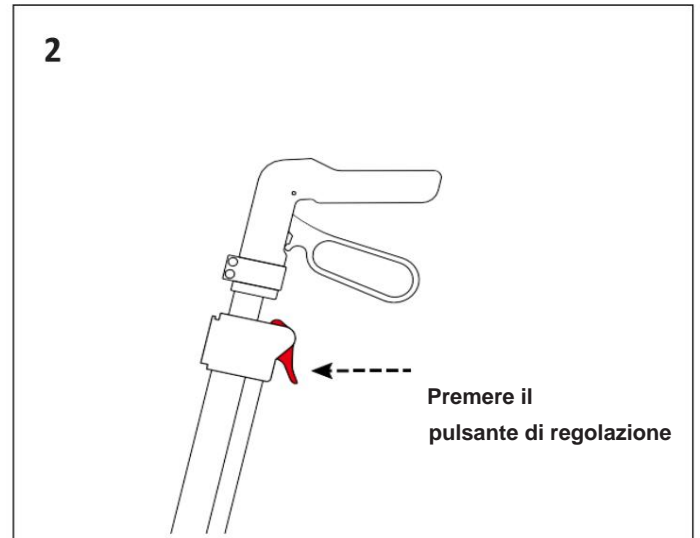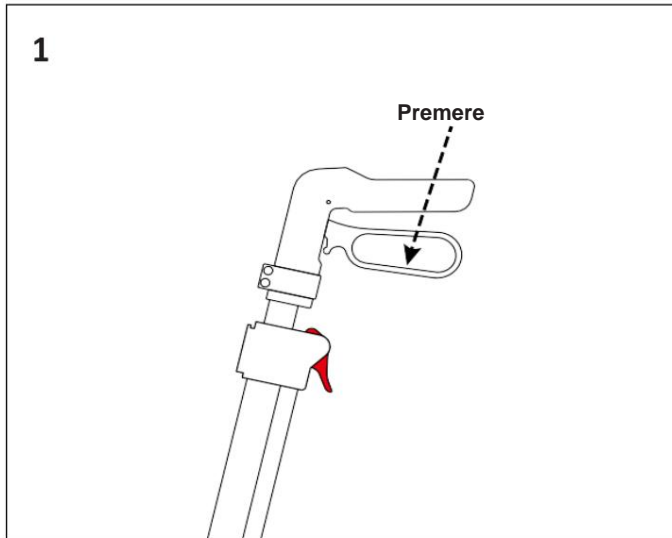

CAMMINARE CON IL ROLLATOR :

- Durante l'utilizzo, stare dritti dietro il deambulatore, non piegare la schiena. •
- Regolare l'altezza delle maniglie se la posizione di utilizzo non è corretta.

PIEGARE IL ROLLATOR:

ha. Sollevare il sedile utilizzando la cinghia del sedile al centro per rilasciare il meccanismo di bloccaggio. B. Per assicurarsi che il deambulatore sia completamente piegato, spingere le maniglie l'una verso l'altra.

Il deambulatore Spirit X3 è progettato per reggersi in piedi da solo.

APRIRE IL ROLLATOR

ha. Per aprire il deambulatore, tirare semplicemente le maniglie verso l'esterno, vedere figura 4.

B. Spingere verso il basso le guide esterne del sedile con un movimento rapido, finché non si sente un clic significativo del meccanismo di bloccaggio

USO DEI FRENI :

Il deambulatore è dotato di freni, azionati da due leve dei freni. Le leve dei freni possono essere utilizzate in due modalità di frenata: freno di marcia e freno di stazionamento.



Controlla il funzionamento dei freni per garantire la tua sicurezza. Le condizioni dell'impianto frenante sono influenzate dall'usura, dall'olio e da altra contaminazione delle ruote posteriori e del meccanismo del freno.

- Per utilizzare i freni a mano, tirare verso l'alto entrambe le leve dei freni contemporaneamente; Per smettere di frenare, rilasciare le leve dei freni.
- Per utilizzare i freni di stazionamento, spingere entrambe le leve dei freni verso il basso nella posizione bloccata [P]. Utilizzare sempre entrambi i freni di stazionamento contemporaneamente. Per terminare la modalità parcheggio, tirare verso l'alto entrambe le leve dei freni contemporaneamente.

UTILIZZO DEL SEDILE

Prima di utilizzare il sedile:

- Assicurarsi che la cintura dello schienale sia fissata saldamente al telaio.
- Controllare che tutte le viti, i bulloni e i dadi della cinghia siano serrati.

PASSAGGIO MARCIAPIEDE

È dotato di passaggio cordolo che facilita il superamento di piccoli ostacoli come marciapiedi e gradini bassi.

1. Assicurati di essere in una posizione stabile mentre tieni entrambe le maniglie.
2. Utilizzare un piede e spingere la leva di inclinazione per sollevare le ruote anteriori.
3. Tenere il deambulatore in questa posizione con le maniglie e avanzare lentamente finché le ruote anteriori non si bloccano sul pavimento.
4. Ora solleva le maniglie e spostati in avanti per posizionare le ruote posteriori sul pavimento.
5. Quando il deambulatore è stabile, è possibile salire sul gradino o sul marciapiede da soli.



La stabilità del deambulatore cambia quando viene inclinato. Stai attento e cerca di aggirare l'ostacolo invece di scalarlo

USO GENERALE



Assicurarsi che entrambe le leve dei freni siano in posizione di parcheggio prima di sedersi. Mantenere le leve dei freni in questa posizione finché non si riprende a camminare. Tieni i piedi tra le ruote posteriori.

MANUTENZIONE - MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione adeguata del prodotto potrebbe provocare lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il deambulatore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detergenti o di prodotti a base solvente.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti intorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in questione. alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano.
- Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiato o usurato.

- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione di blocco, quindi provando a spingerle
camminatore.
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il deambulatore. Consultare un rivenditore autorizzato.

• **Elenco di controllo:**

Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue:

Controlla l'oggetto	HA tutto momento	Ogni settimana	Tutti IL mese	Ogni anno
Clip e rotella per la regolazione dell'altezza		X		
Saldature strutturali alle ruote		X		
Pulizia	X			
Viti e elementi di fissaggio		X		
Stabilità del telaio e dello schienale			X	
Condizioni del sedile				X
Freni	X			

CAMBIO DI PROPRIETA'

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato rispettando le istruzioni igieniche. Durante il trasferimento del prodotto, ricordati di fornire tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In anticipo, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Quando il prodotto diventa inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se tu vorresti riciclare per conto tuo, chiedi linee guida all'azienda locale di gestione dei rifiuti eliminazione.

MAGAZZINAGGIO



Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi rischi di ferite gravi

- Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino ad un termosifone) o vicino ad una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di stoccaggio e conservazione del prodotto.
- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto imballando da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria traduzione).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme, nello stesso posto (o contrassegnarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza il minimo carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto non si inceppi nulla...).

DURATA DI UTILIZZO

La durata prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per a utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente multiutente (casa di cura o ospedale), la sua durata potrebbe ridursi ridimensionato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Lungo. 61 x prof. 69 pezzi di pelle. 77/96 cm
Larghezza della maniglia	45 cm
Diametro della ruota	22cm
Carico massimo del cestello	5 chilogrammi
Peso	7,2 kg
Carica massima	130 chilogrammi

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, modifiche o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.