

ROLLATORE NITRO ELITE CF
ROLLATORE NITRO ELITE CF
AMBULATEUR NITRO ELITE CF

ARTICOLO N. RTL10266CF

driveTM

www.drivemedical.com

ELENCO DELLE PARTI



Articolo n. RTL10266CF

CAPACITÀ DI PESO: 300 LIBBRE (136 KG)

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Impugnatura | 7. Sedile |
| 2. Impugnatura tubolare regolabile | 8. Borsa |
| 3. Riflettore posteriore sull'impugnatura | 9. Ruota anteriore |
| 4. Leva del freno | 10. Vite regolazione freno |
| 5. Pulsante di blocco delle impugnature | 11. Ruota posteriore |
| 6. Schienale | 12. Portabastone |

INTRODUZIONE

L'ausilio per la deambulazione è adatto a un singolo utente con mobilità ridotta. Il Nitro Elite lo è ideale per uso interno ed esterno.

NITRO COMPRENDE:

1. Borsa
2. Schienale
3. Portabastone
4. Istruzioni per l'uso


APRIRE IL NITRO

Posizionare il deambulatore sulle ruote. Aprire il deambulatore. Premere i tubi attaccati al sedile verso il basso finché non si bloccano in posizione (figura 1).




RIMOZIONE/ATTACCO DELLA BORSA PER IL TRASPORTO

Per fissare la borsa, piegare leggermente il Nitro e fissare la borsa con le chiusure a strappo ai tubi situati sull'estremità anteriore del telaio del sedile (figura 2).

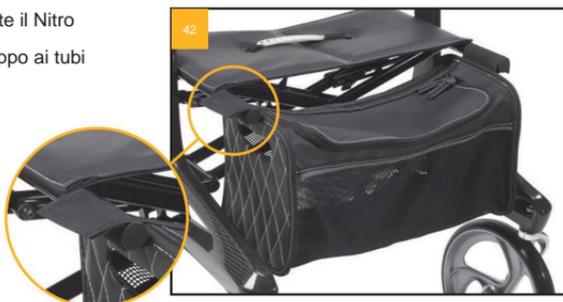

REGOLAZIONE ALTEZZA

Tieni premuto il rilascio bianco pulsanti come mostrato in figura 3. Contemporaneamente muovi l'impugnatura verso l'alto o verso il basso. Quando viene raggiunta l'altezza desiderata, rilasciare i pulsanti di rilascio bianchi e l'impugnatura si bloccherà automaticamente nella posizione di altezza successiva possibile.

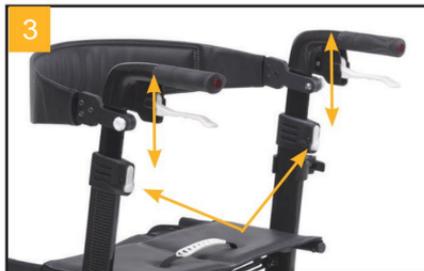

FRENATA/BLOCCAGGIO

Tirare entrambe le leve dei freni verso l'alto per azionare i freni (vedere figura 4). Applicare sempre la pressione del freno in modo uniforme.

Per bloccare i freni, assicurarsi che Nitro sia fermo e premere entrambe le leve dei freni verso il basso finché non si bloccano in posizione (vedere la figura 7).

Per rilasciare i freni dalla posizione bloccata, tirare verso l'alto le leve dei freni.

Testare regolarmente i freni.



REGOLAZIONE DEI FRENI

Per regolare la forza frenante, regolare il freno premendo l'alloggiamento della vite verso il basso (figura 6) e poi girare a sinistra o destra (figura 7).



SEDUTA

Posizionare il Nitro su una superficie piana. Blocca i freni (posizione di parcheggio). Siediti dritto e non inclinati all'indietro. (Vedi figura 8).

NON MUOVERE IL ROLLATOR DA SEDUTI.



PIEGATURA / TRASPORTO / STOCCAGGIO

Per ripiegarlo, tirare verso l'alto la maniglia del sedile come mostrato nella figura 9. Il Nitro può essere fissato spingendo insieme i due lati del telaio finché non si sente un clic udibile che indica che il blocco è in posizione. Separare le maniglie per sbloccare.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Utilizzare solo come ausilio per la deambulazione! • Utilizzare solo su superfici piane e solide. • Peso massimo dell'utente: 300 libbre. • Controllare regolarmente le viti e gli elementi di fissaggio sul Nitro e serrarli nuovamente se necessario. • Utilizzare la borsa solo per il trasporto di oggetti e non sovraccaricare. Carico massimo: 11 libbre. • Non esporre il prodotto a temperature superiori a 104°F per un periodo di tempo prolungato, in quanto ciò potrebbe causare il surriscaldamento delle parti Nitro e ustioni per l'utente. • Assicurarsi che il deambulatore sia completamente aperto, il sedile abbassato e la barra pieghevole sotto il sedile è bloccato in posizione abbassata.
- Assicurarsi che entrambe le manopole siano completamente serrate e siano alla stessa altezza. Testare il rollator per la stabilità prima di applicare tutto il peso alle impugnature.
- Testare la leva del freno prima di utilizzare il deambulatore. Quando le ruote sono bloccate, la barra di bloccaggio sulle ruote posteriori dovrebbe impedire alle ruote di girare. Quando i blocchi vengono rilasciati, le ruote dovrebbero girare liberamente.
- Bloccare sempre la leva del freno prima di sedersi e non utilizzare il sedile quando l'unità si trova su un terreno inclinato o irregolare.
- Sostituire i pneumatici quando sono notevolmente usurati o danneggiati. • **NON MUOVERE IL DEambulatore DA SEDUTI.** Questo è solo un ausilio per la deambulazione e non deve essere utilizzato come dispositivo di trasporto.

PULIZIA / MANUTENZIONE

Pulire regolarmente a mano con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi.

GARANZIA LIMITATA A VITA

Il telaio del prodotto Drive Medical è garantito privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per tutta la vita dell'acquirente consumatore originale. La maniglia del freno e l'alloggiamento sono coperti per un periodo di 5 anni dall'acquirente originale del consumatore.

Questo dispositivo è stato costruito secondo standard rigorosi e ispezionato attentamente prima della spedizione.

Questa garanzia limitata a vita è un'espressione della nostra fiducia nei materiali e nella lavorazione dei nostri prodotti e la nostra garanzia per il consumatore di anni di servizio affidabile.

Questa garanzia non copre il guasto del dispositivo dovuto a uso improprio o negligenza del proprietario o alla normale usura. La garanzia non si estende ai componenti non durevoli, come accessori in gomma, rotelle e impugnature, che sono soggetti a normale usura e necessitano di sostituzione periodica.

In caso di domande sul dispositivo Drive o sulla presente garanzia, contattare un rivenditore Drive autorizzato.

Avvertenza: gli articoli e l'imballaggio di questa spedizione contengono sostanze chimiche note allo stato della California come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi.

*Questo prodotto soddisfa o supera tutte le normative federali in materia di sicurezza e ambiente.



© 2016 Medical Depot, Inc. Tutti i diritti riservati.

Drive è un marchio di Medical Depot, Inc.

Port Washington NY 11050 USA Prodotto in Cina