

DATA DI STAMPA: Lunedì, 8 Novembre 2021



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/01328/](http://www.chinesport.it/go/01328/)

### 01328 PARALLELA STANDARD 3M

È un sistema di barre parallele di **3 m di lunghezza** per l'esercizio di un'attività fisica-riabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una **pedana** in legno bilaminato, antiusura e dotata di rampe d'accesso. I corrimani sono in termoplastica antiscivolo. Tutte le parti sono facilmente lavabili.

Queste barre parallele sono regolabili in altezza con un **sistema telescopico** e sono assicurate da un esclusivo volantino a doppia azione che impedisce sia allentamenti accidentali che possibili leggeri assestamenti dei montanti durante il carico della persona in deambulazione.

Possono essere utilizzati sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici [percorsi terapeutico-riabilitativi](#).



01328 - PARALLELA STANDARD 3M



## Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni max (cm) :	311 x 83 x 114 h
Sistema di regolazione altezza corrimani :	telescopico
Altezza corrimani min - max (cm) :	77 ÷ 107
Sistema di regolazione larghezza corrimani :	non disponibile
Regolazione larghezza corrimani (cm) :	non disponibile
Regolazione in inclinazione della pedana :	non disponibile
Portata su singolo corrimano (kg) :	135
Modularità (abbinamento di più parallele) :	scivolo d'accesso rimovibile
Peso (kg) :	85

## Documentazione disponibile online

<b>Dichiarazione di conformità</b> - Dichiarazione di conformità Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo	<a href="#">📄</a> .PDF 110.12 KB
<b>Manuale istruzioni</b> - Manuale Istruzioni Italiano, Inglese	<a href="#">📄</a> .PDF 657.52 KB
<b>Dichiarazione di conformità</b> - Dichiarazione conformità Italiano, Inglese	<a href="#">📄</a> .PDF 200.92 KB
<b>Manuale istruzioni</b> - Manuale Istruzioni Italiano	<a href="#">📄</a> .PDF 562.38 KB
<b>Manuale istruzioni</b> - Mode d'emploi Francese	<a href="#">📄</a> .PDF 438.69 KB
<b>Manuale istruzioni</b> - User and Maintenance Manual Inglese	<a href="#">📄</a> .PDF 421.69 KB

[📄](#) Il documento è disponibile per il download in area riservata

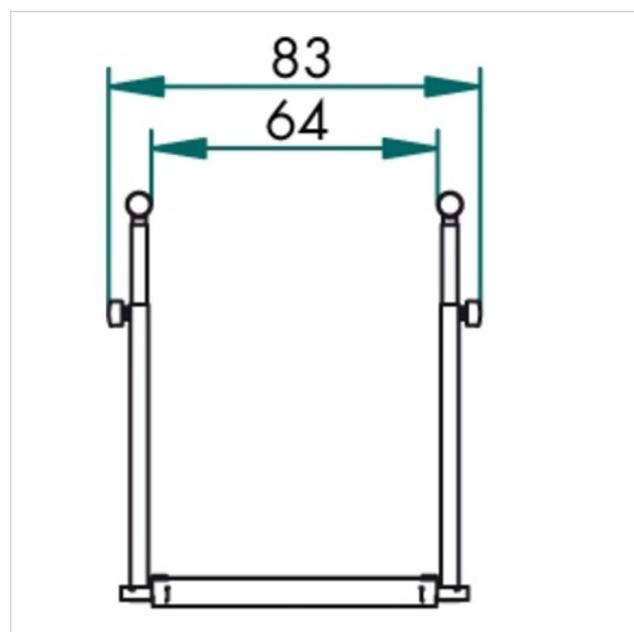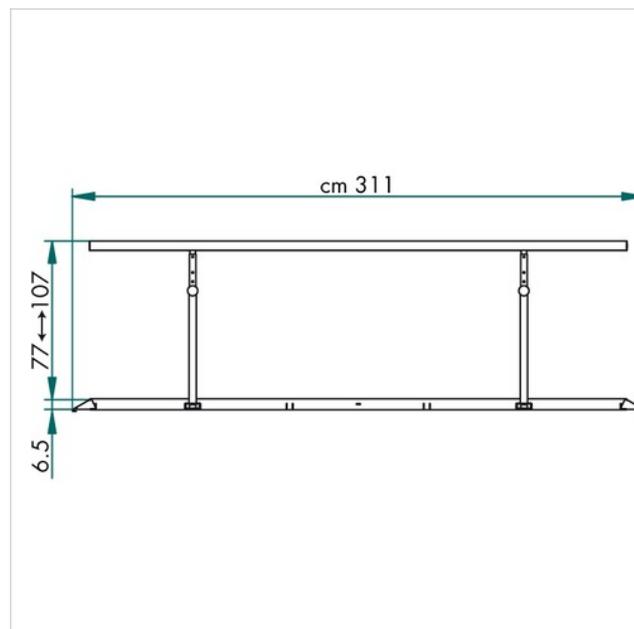

**Accessori**



**01330 OSTACOLO-DIVARICO**

Moduli termoplastici utili per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



**01335 CARRELLO PORTA PERCORSI**

Carrello porta percorsi per parallele, in acciaio verniciato e si può utilizzare per ogni tipo di moduli (non compresi).



**01379 SET PERCORSI TERAPICI**

Una serie di moduli in termoplastica e di sacchetti contenenti diversi materiali possono essere utilizzati come accessori per realizzare dei percorsi di deambulazione.



**01380 CARRELLO PER PARALLELE**

Carrello con appoggio antibracchiale applicabile a tutte le parallele. Offre un maggiore sostegno alla persona durante la deambulazione.



**02400 SACCHETTO ANDATURA DA KG 1**

Sacchetto andatura da 1 kg. Contiene sabbia.




**02410 SACCHETTO ANDATURA DA KG 2**

Sacchetto andatura da 2 kg. Contiene sabbia.



**02420 SACCHETTO ANDATURA DA KG 3**

Sacchetto andatura da 3 kg. Contiene sabbia.

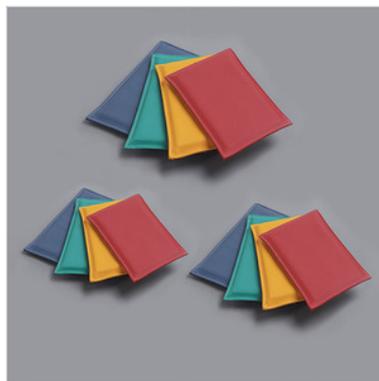

**02430 SET 12 SACCHETTI ANDATURA**

Set composto da 12 sacchetti di sabbia di diverso peso e dimensioni



**02500 SACCHETTO MOTORIO DA GR 300**

Sacchetto motorio da 300g. Contiene granuli in PVC.



**02510 SET SACCHETTI MOTORI**

Si compone di 16 sacchetti motori contenenti granuli.



**08585 SET SACCHETTI SENSORIALI**

Si compone di 12 sacchetti contenenti differenti materiali per offrire una diversa sensibilità di appoggio.



**08586 RULLI-SACCHETTI**

Moduli in termoplastica testurizzata con rotolo in legno e borsa sensoriale. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



**08587 SENSORIALI**

Moduli sensoriali in termoplastica testurizzata. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



**08589 EMISFERE**

Moduli in materiale termoplastico testurizzato con semisfere. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.




**08591 CONCAVO-CONVESSO**

Moduli termoplastici concavi-convessi. Utile per creare esercizi di deambulazione e perturbazioni durante il programma riabilitativo. Set di due pezzi.



**AC0550 BARRA FINE CORSA**

Accessorio di fine corsa e di supporto per agevolare l'utente nell'inversione del senso di deambulazione. Prolunga il percorso terapeutico - riabilitativo.

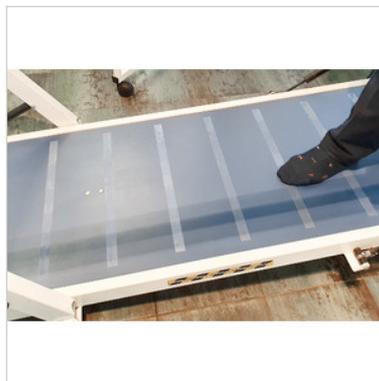

**AC1257 KIT ANTISCIVOLO PARALLELE**

Fasce adesive antiscivolo applicabili alla pedana base di qualunque sistema di parallele. Particolarmente utile nel caso d'utilizzo senza calzature. 16 pezzi.

**Altre immagini dell'articolo**



Particolari della regolazione in altezza dei corrimano