


<p>MODELLO</p>	<p>Pressoterapia Power Q6000-Plus</p>	
<p>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz • Consumo potenza 80 VA • Tempo regolabile 0÷99 minuti • Pressione regolabile 10÷240 mmHg ±10% • 2 canali di uscita (possibilità di collegare fino a 3 applicatori) • Display grafico • 5 programmi • 8 livelli di velocità del flusso d'aria • Peso: 9.5 Kg 		 <p>Jack aria stop</p>
<p>Indicata e suggerita per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linfedema • Paralisi degli arti • Compressione passiva in patologie venose • Artrite reumatoide • Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia • Trattamento di ematomi in seguito ad interventi chirurgici • Trattamenti anticellulite in stadio iniziale • Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa 		<p>Power Q6000 Plus è il nuovo sistema di pressoterapia per uso professionale che favorisce una corretta circolazione venosa grazie alla sua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio delle camere d'aria.</p> <p>La pressoterapia è in grado di risolvere il problema di ristagno nei vasi sanguigni danneggiati o non irrorati correttamente; promuove inoltre l'eliminazione dei fluidi interstiziali in eccesso favorendo il corretto funzionamento del sistema linfatico. Risulta quindi utile sia per scopi estetici (trattamenti anticellulite) sia per trattare problemi legati alla circolazione sanguigna e linfatica (linfedema,).</p> <p>Grazie alla sue due uscite e ai tubi di raccordo a 1 o 2 derivazioni forniti a corredo, Power Q6000 Plus permette di collegare simultaneamente fino a 3 applicatori: tale funzione è estremamente utile nel caso sia necessario eseguire ad esempio il trattamento della zona addominale e di entrambi gli arti inferiori nella medesima seduta.</p> <p>Power Q6000 Plus possiede 5 differenti modalità di gonfiaggio delle camere d'aria, 8 livelli di velocità del flusso d'aria all'interno delle camere e la possibilità di impostare il tempo e la pressione della terapia. In questo modo è possibile personalizzare ciascun trattamento in base alle esigenze terapeutiche del paziente.</p> <div data-bbox="354 1682 1268 1961">  <p>[MODE A₁] [MODE A₂] [MODE B] [MODE C] [MODE D]</p> </div>
<p>I.A.C.E.R. S.r.l. via S. Pertini 24/a 30030 Martellago (VE) - ITALY Tel 0039 041 540 1356 Fax 0039 041 540 2684 e-mail: iacer@iacer.it</p>		

Power Q6000 Plus viene fornita completa di due gambali a 6 camere di compressione, 2 plantari pressori, 2 coppie di gambali inTNT monopaziente, una fascia addominale a 6 camere di compressione, un bracciale a 6 camere di compressione e i relativi tubi di raccordo a 1 e 2 derivazioni.

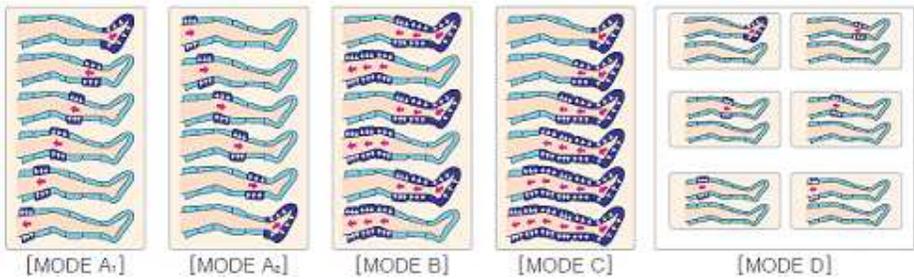

Misure degli accessori

Gambale

- Lunghezza: 86 cm circa (da estremo superiore a tallone)
- Circonferenza coscia: 71 cm circa
- Circonferenza caviglia: 42 cm circa

Bracciale

- Lunghezza: 86 cm circa
- Circonferenza al bicipite: 50 cm circa
- Circonferenza al polso: 36 cm circa

Fascia addominale

- Lunghezza: 136 cm circa
- Altezza: 46 cm circa
- Girovita: 55-110 cm

Power Q6000 Plus è un dispositivo medico di classe IIa (CE1023 in accordo con MDD 93/42/CEE).