


Nome Prodotto

Materasso Antidecubito Oba Medica TX.



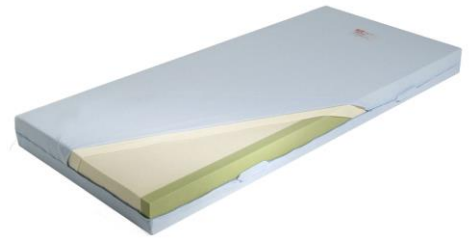


Codice	Misure (cm)	Portata (kg)
05.05.OBAMTX	200 x 90 x 14	150
05.05.OBAMTX120	200 x 120 x 14	150

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.

Descrizione


Il materasso OBA MEDICA TX è realizzato con espansi speciali ignifughi di alta qualità e densità molto elevata. L'espanso a cellule aperte è un'esclusiva del programma OBA; i bordi laterali di contenimento sono in espanso ad alta densità portante; facilitano e supportano ottimamente i trasferimenti laterali del paziente. La fodera è realizzata in OBATEX traspirante, impermeabile, antibatterica e ignifuga; realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.

Materiali	
Materasso	Espanso con Densità 50 Kg/m ³
Fodera	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max. 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Bassa Temperatura
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.006
Codice CND	Y033306
Codice RDM	85070/R

Product Name

Matress Oba Medica TX.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (kg)
05.05.OBAMTX	200 x 90 x 14	150
05.05.OBAMTX120	200 x 120 x 14	150

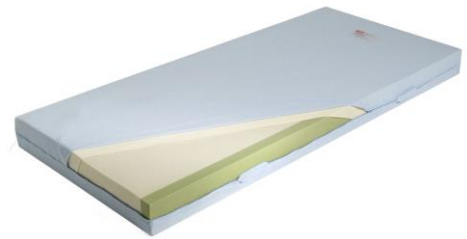






Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.

Description

The OBA MEDICA TX mattress is made of special high quality fire retardant foam with very high density. The open cell foam is exclusive to the OBA program; the side containment edges are in high-density, load-bearing foam; they facilitate and optimally support the lateral transfer of the patient, for example on a wheelchair. The breathable, waterproof, antibacterial and fireproof OBATEX cover is available; made of polyurethane and polyester, it can be sterilized in an autoclave.

Materials	
Mattress	Foam with a Density of 50 Kg/m3
Cover	Obatex
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 95°C or 200°F
	Do not Bleach
	Do not Iron
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Low Heat
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.006
CND Code	Y033306
RDM Code	85070/R